

— WALKTHROUGH · VOORJAAR 2026 —

Hoe het werkt.

Van sensor tot compliance — elke stap die de horeca-uitbater of zorgverlener doorloopt om temperatuurkritieke werking onder controle te krijgen.

STAP 01 · LIVE OVERZICHT

Alle sensoren in één blik.

Van het moment dat de Bluetooth-sensor binnen bereik van een gateway komt, verschijnt de meting in het dashboard. Geen handmatige sync, geen cloud-vertraging — temperaturen elke 30 seconden, kritieke afwijkingen direct gemarkeerd.

LIVE STATUS

Status-orbs per sensor — groen, oranje, rood. Direct prioriteit.

BATTERIJ & UPTIME

Per sensor zichtbaar wanneer service nodig is.

ACTIVE ALARMEN

Rechts-paneel met acknowledge / pauzeer-acties.

The screenshot displays the RPlay Temperature Intelligence dashboard. It features a table of sensors and a panel for active alarms.

Sensor	Locatie	Temp	Δ	Batterij	Update
FR-06 AA-BB-CC	Laboratorium	8.6°C	+0.6°	65%	3m
FR-01 AA-BB-CC	Apotheek	4.2°C	OK	87%	2m
FR-02 AA-BB-CC	Apotheek	5.8°C	OK	92%	1m
FR-03 AA-BB-CC	Apotheek	4.6°C	OK	76%	nu
FR-04 AA-BB-CC	Apotheek	3.8°C	OK	82%	1m
FR-05 AA-BB-CC	Laboratorium	3.1°C	OK	78%	nu

The right panel, titled 'Active Alarms', shows a critical alarm for sensor FR-06 in the Laboratory. The alarm message is 'CRITICAL FR-06 Laboratory 8.6°C range 2-8°C'. It includes an 'ACKNOWLEDGE' button and a 'Snooze' button.

STAP 02 • WARMTEKAART

Patronen die je niet ziet in cijfers.

De warmtekaart kleurt elke sensor volgens z'n actuele staat: groen voor binnen-marge, oranje voor waarschuwing, rood voor kritiek. Eén oogopslag op het hele gebouw — perfect voor wand-displays in de keuken of het labo.

STATUS-MODUS


Kleur op basis van alarm-regels per categorie.

GRADIËNT-MODUS

Kleur op temperatuur-bereik voor trend-detectie.

FILTERS

Per gebouw, afdeling, groep — schaal tot 1000+ sensoren.

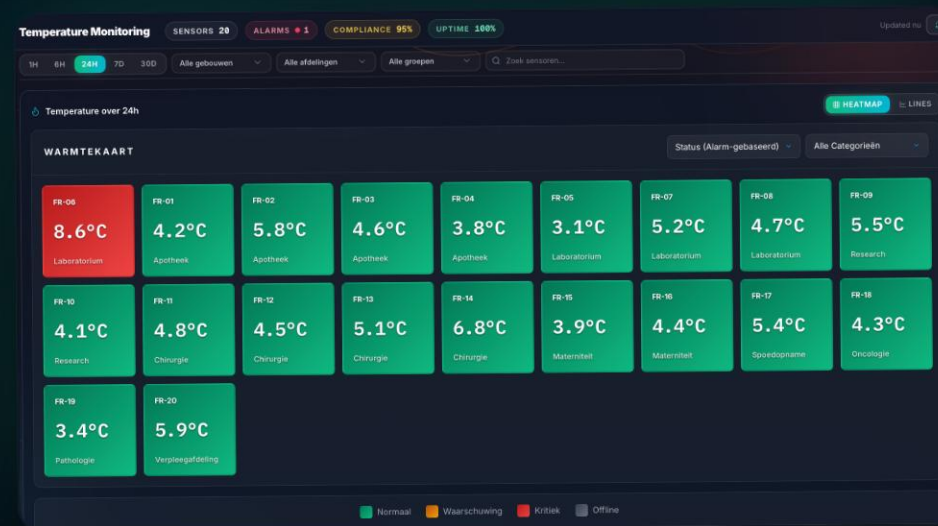

De geschiedenis vertelt het verhaal.

Selecteer één of meerdere sensoren en bekijk temperatuur-trends over 1 uur, 24 uur of 30 dagen. Zoom in op een afwijking, vergelijk met andere koelingen, exporteer naar CSV voor de boekhouder of de auditeur.

MULTI-SENSOR OVERLAY

Vergelijk tot 8 sensoren in één grafiek.

MIN / MAX / GEMIDDELD

Live berekend over de geselecteerde periode.

CSV-EXPORT

Eén klik — formaat klaar voor FAVV of HACCP-audit.



STAP 04 · ALARMEN

Een afwijking, een notificatie.

Wanneer een sensor buiten z'n marge gaat, krijgt het juiste team een notificatie via push, e-mail of SMS. Acknowledge het alarm met één tap, pauzeer het tijdens een onderhoudsbeurt, of escaleer naar een collega.

4 ERNSTNIVEAUS


Critical / High / Medium / Low — eigen escalatie per niveau.

MULTI-CHANNEL

Push notificaties, e-mail, SMS, en webhook integraties.

AUDIT-TRAIL

Wie heeft wanneer wat acknowledged — volledig logbestand.

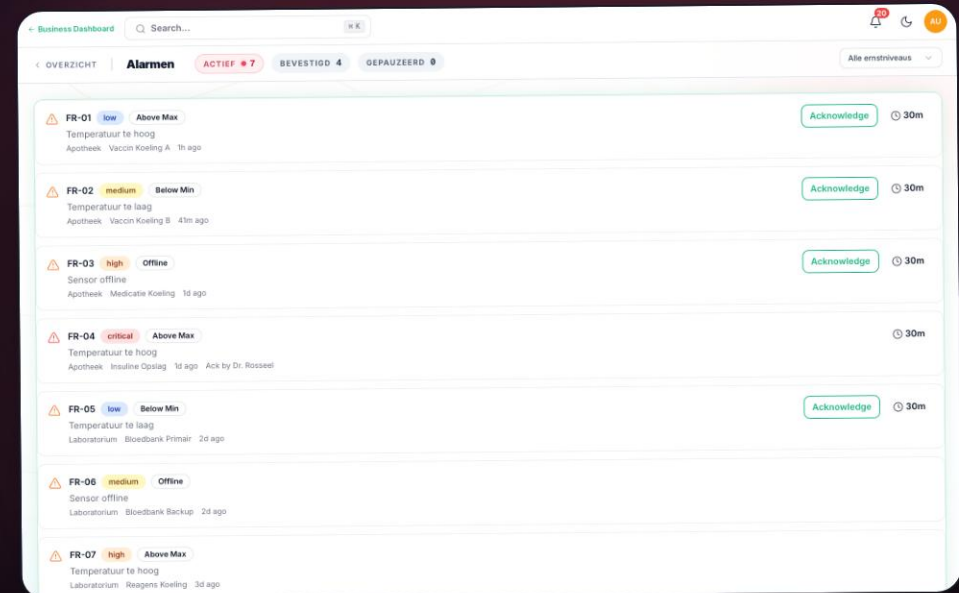

STAP 05 • REGELS

Eén regel per bestemming.

Bloedbank op 2-6°C met 2 minuten tolerantie. Vaccins op 2-8°C met 5 minuten. Algemene koeling op 2-8°C met 30 minuten. Stel regels in per categorie, per individuele sensor of voor de hele organisatie — RPlay weet welke marge geldt voor welk asset.

CATEGORIE-TEMPLATES

Bloedbank, vaccins, chemo, voeding — voorgedefinieerd.

SPECIFIEKE OVERRIDES

Per sensor uitzonderingen voor bijzondere assets.

TIJDGEBONDEN MODI

Strakker overdag, ruimer 's nachts — auto-switch.

